
MOUNT-IT!
HEALTH SERIES

Installation Manual
SKU: MI-16037
V2 06/26

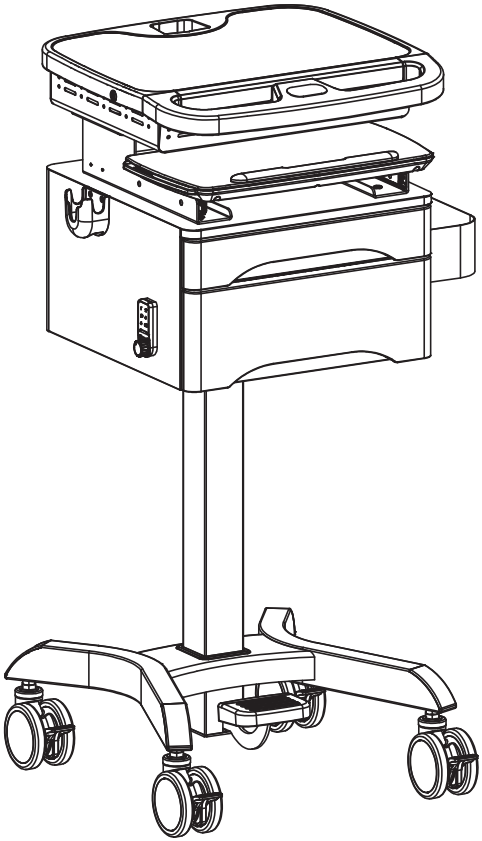

Scan this QR code for product information, videos, and assembly assistance.

MEDICAL CART

HAVE QUESTIONS?

Monday - Friday from 5:00am - 5:00pm PST

support@mount-it.com (855) 925-5668 www.mount-it.com

Thank you for choosing Mount-It!

EN **IMPORTANT:**
Failure to read, thoroughly understand, and follow all instructions can result in serious personal injury, damage to equipment, or voiding of factory warranty.

INSTRUCTIONS OF SAFETY AND WARNINGS:
- Make sure that the mounting surface is strong enough to handle a mounted product and equipment.
- DO NOT EXCEED THE MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY.
- Always use an assistant or a mechanical lifting device to safely lift and position heavy products.
- Use screws firmly, but do not over tighten. Over tightening can cause product damage that greatly reduces the holding power.
- Keep a clear area and distance from moving parts when using the product.
- Use only as intended. Never stand, sit or climb on the product.
- This product is intended for indoor use only.
- Any attempts to reconstruct the product aren't allowed.
- This product may contain small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep children away unless the product is intended for their use and all instructions and manuals are fully reviewed and understood by them.
- Check that the product is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

Should you ever have any questions or feel you require help please contact Mount-It!

FR **IMPORTANT:**
Le non-respect de toutes les instructions peut entraîner des blessures graves, des dommages à l'équipement ou l'annulation de la garantie de l'usine.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS:
- S'assurer que la surface de montage est suffisamment solide pour supporter le produit et l'équipement montés.
- NE PAS DÉPASSER LA CAPACITÉ NOMINALE MAXIMALE MENTIONNÉE.
- Toujours utiliser un assistant ou un dispositif de levage mécanique pour soulever et positionner en toute sécurité les produits lourds.
- Serrer les vis fermement, mais sans trop serrer. Un serrage excessif peut endommager le produit et réduire considérablement sa capacité de maintien.
- Lors de l'utilisation du produit, garder une zone dégagée et une distance suffisante par rapport aux pièces mobiles.
- Utiliser ce produit uniquement de la manière prévue. Ne pas se tenir, s'accrocher ou grimper sur le produit.
- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Toute tentative de reconstruction du cadre n'est pas autorisée.
- Ce produit peut contenir de petites pièces susceptibles de présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Tenez les enfants éloignés du produit, à moins que celui-ci ne soit destiné à leur usage et que toutes les instructions et manuels soient entièrement examinés et compris par eux.
- Vérifier à intervalles réguliers (au moins tous les trois mois) que le produit est sécurisé et peut être utilisé en toute sécurité.

Si vous avez des questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter le magasin où vous avez effectué votre achat pour obtenir de l'aide.

DE **WICHTIG:**
Es kann zu schweren Verletzungen, Schäden am Gerät oder zum Erlöschen der Werksgarantie kommen, wenn Sie nicht alle Anweisungen lesen, verstehen und befolgen.

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE:
- Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um das montierte Produkt und die Ausrüstung zu tragen.
- DIE ANGEGEBENE MAXIMALE GEWICHTSKAPAZITÄT DARF NICHT ÜBERSCHRITTEN WERDEN.
- Schwere Produkte dürfen aus Sicherheitsgründen nur mit Hilfe einer Hilfsperson oder einer mechanischen Hebevorrichtung angehoben und positioniert werden.
- Ziehen Sie die Schrauben fest, aber nicht übermäßig fest an. Ein Überanziehen des Anziehen kann das Produkt beschädigen und die Haltekraft stark verringern.
- Halten Sie bei der Verwendung des Produkts einen Sicherheitsbereich und zu beweglichen Teilen ein.
- Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden. Sie dürfen niemals auf dem Produkt stehen, hängen oder klettern.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
- Es ist nicht erlaubt, die Konstruktion zu rekonstruieren.
- Dieses Produkt enthält möglicherweise Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können, wenn sie verschluckt werden. Halten Sie Kinder fern, außer wenn das Produkt für sie vorgesehen ist und sie alle Anweisungen und Handbücher vollständig gelesen und verstanden haben.
- Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen (mindestens alle drei Monate) auf seine Sicherheit und Gebrauchstüchtigkeit.

Falls Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an die Stelle, bei der Sie das Produkt gekauft haben.

ES **IMPORTANTE:**
Si no se leen, se comprenden a fondo y se siguen todas las instrucciones, se pueden producir lesiones personales graves, daños al equipo o la anulación de la garantía de fábrica.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS:
- Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente fuerte como para soportar el producto y el equipo montados.
- NO EXCEDA LA CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA INDICADA.
- Utilice siempre un ayudante o un dispositivo mecánico de elevación para levantar y colocar con seguridad los productos pesados.
- Apriete los tornillos con firmeza, pero no lo haga en exceso. Un apriete excesivo puede provocar daños en el producto que reducirán en gran medida su capacidad de sujeción.
- Mantenga una zona despejada y una distancia de las piezas móviles cuando utilice el producto.
- Utilícelo solo para el uso previsto. Nunca se pise, se cuelgue o suba al producto.
- Este producto está destinado a ser utilizado únicamente en interiores.
- No se permite ningún intento de reconstruir la construcción.
- Este producto puede contener piezas pequeñas que pueden suponer un peligro de asfixia si se ingieren. Mantenga a los niños alejados a menos que el producto esté destinado a su uso y todas las instrucciones y manuales hayan sido revisados y comprendidos por ellos.
- Compruebe periódicamente (al menos cada tres meses) que el producto es seguro y se puede utilizar.

Si tiene alguna duda o cree que necesita ayuda, póngase en contacto con su lugar de compra para que le ayuden.

PT **IMPORTANTE:**
É extremamente importante ler, compreender na íntegra e seguir todas as instruções. Qualquer falha em seguir estes passos pode resultar em sérios ferimentos, danos no equipamento e anulação da garantia.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E AVISOS:
- Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar o produto e o equipamento montados.
- NÃO EXCEDA A CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO INDICADA.
- Utilize sempre um assistente ou um dispositivo de elevação mecânico para levantar e colocar no lugar qualquer produtos pesados de modo seguro.
- Aperte os parafusos com firmeza, mas sem os apertar demasiado. Quando apertados em demasia, são causados danos que reduzem significativamente a capacidade de fixação.
- Ao utilizar o produto, mantenha uma área livre de objetos e distância de quaisquer peças móveis.
- Utilize o produto apenas para os fins previstos. Nunca se deve subir, escalar ou pendurar sobre o produto.
- Este produto destina-se apenas a ser utilizado em espaços interiores.
- Não são permitidas quaisquer tentativas de reconstruir a estrutura.
- Este produto pode conter pecas pequenas que constituem perigo de asfixia, se colocadas na boca. Mantenha as crianças afastadas do produto, a menos que este se destine às mesmas e que todas as instruções e manuais sejam totalmente analisados e compreendidos por elas.
- Verifique com alguma regularidade se o produto se mantém seguro para ser utilizado (pelo menos de três em três meses).

Caso tenha alguma dúvida ou ache que precisa de ajuda, entre em contacto com o local onde efetuou a compra para obter ajuda.

RU **ВАЖНО:**
Невнимательное ознакомление со всеми инструкциями и их несоблюдение может привести к серьезным травмам, повреждению оборудования или прекращению действия заводской гарантии.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
- Убедитесь, что монтажная поверхность достаточно прочная, чтобы выдержать монтируемое изделие и оборудование.
- НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ВЕС.
- Для безопасного подъема и надлежащего размещения тяжелых изделий обязательно обращайтесь за помощью или пользуйтесь грузоподъемными механизмами.
- Винты следует затягивать плотно, но не перетягивая их. Перетягивание может привести к повреждению изделия, что значительно ухудшит прочность крепления.
- Держитесь на достаточно безопасном расстоянии от движущихся частей изделия при его использовании.
- Используйте только по назначению. Никогда не становитесь на изделие, не висните на нем и не залезайте на него.
- Данное изделие предназначено для использования только в помещениях.
- Любые попытки изменить конструкцию запрещены.
- Данное изделие может содержать мелкие детали, которые могут стать причиной удушения при попадании в дыхательные пути. Не подпускайте детей к изделию, если оно не предназначено для использования ими или если они полностью не ознакомлены с инструкциями и указаниями по эксплуатации и не поняли их их.
- Необходимо регулярно проверять (как минимум, раз в три месяца), что изделие зафиксировано и его использование безопасно.

Если у вас возникнут вопросы или вам потребуется помощь, свяжитесь с продавцом, у которого вы приобрели изделие.

AR **مهم:**
إن عدم قراءة التعليمات بعناية وعدم فهمها واتباعها قد يؤدي إلى الحصول إصابات جسدية خطيرة أو تلف المعدات أو بطلان الضمان.

تعليمات السلامة والتحذيرات:
- احرص على أن يكون سطح التثبيت قوياً بما يكفي لحمل المنتج المثبت عليه والمعدات.
- لا تتجاوز الحد الأقصى المسموح للسعة المدرجة.
- استعن دائمًا بمساعد أو جهاز مكانيكي لرفع الحمولة بطريقة سليمة ووضع المنتجات الثقيلة في أماكنها.
- اربط البراغي بإحكام، ولكن لا تبالغ في ربطها. قد تؤدي المبالغة في الربط إلى تلف المنتج مما يقلل قوة التمسك بشكل كبير.
- حافظ على وجود مساحة خلوى وسافة كافية بعيدًا عن الأجزاء المتحركة عند استخدام المنتج.
- استخدمه للأغراض المتعمدة فقط. يُمنع تمامًا الوقوف على المنتج أو الجلوس عليه أو تسلقه.
- هذا المنتج مخصص للاستخدام داخل المنازل فقط.
- يُمنع تمامًا أي محاولات لإعادة بناء الهيكل.
- قد يحتوي هذا المنتج على أجزاء صغيرة قد تشكل خطر الاختناق في حال ابتلاعها. احرص على إبعاد الأطفال إلا إذا كان المنتج من أجلهم، وتأكد من أنهم قرأوا كل التعليمات والكتيبات وفهموها بالكامل.
- تأكد من أن المنتج مستقر وآمن للاستخدام وذلك على فترات منتظمة (على الأقل كل ثلاثة أشهر مرة واحدة).

إذا كنت لديك أي أسئلة أو كنت ترغب في طلب المساعدة، يُرجى التواصل مع الشركة التي اشتريت منه المنتج وذلك من أجل المساعدة.

JP **重要事項:**
すべての指示を読み、完全に理解し、従わないと、重傷を負ったり、機器が破損したり、工場保証が無効になったりする可能性があります。

安全性と警告の説明:
- 取り付け面は、取り付けられた製品や機器を取り扱うのに十分な強度があることを確認してください。
- 記載されている最大重量を超えないようにしてください。
- 重い製品を安全に持ち上げて配置するには、常にアシスタントまたは機械式持ち上げ装置を使用してください。
- ネジはしっかりと締めますが、締めすぎないでください。締めすぎると製品が損傷し、保持力が大幅に低下する可能性があります。
- 製品を使用する場所には、障害物がなく、可動部品から適切な距離を保つ必要があります。
- 意図したとおりにのみ使用してください。製品の上に立ったり、ぶら下がったり、登ったりしないでください。
- 本製品は屋内での使用のみを目的としています。
- 許可なく製品構造を変更しないでください。
- この製品には、飲み込んだ場合に窒息の危険性があるかさなアイテムが含まれている場合があります。子供たちを遠ざけてください。製品説明書がすべて両方に目を通して理解しており、このマニュアルを完全に理解していない限り、子供はこの製品を使用しないでください。
- 製品が安全に使用できることを定期的に（少なくとも3カ月ごとに）確認してください。

ご不明な点がある場合やサポートが必要な場合は、購入先にお問い合わせください。

KR **중요 주의사항:**
모든 지침을 읽고 철저히 이해하고 따르지 않으면 심각한 부상, 장비 손상 또는 공장 보증 무효화로 이어질 수 있습니다.


안전 및 경고 지침:
- 장착된 제품 및 장비를 다룰 수 있을 만큼 장착면이 튼튼한지 확인하십시오.
- 표시된 최대 중량 용량을 초과할 수 없습니다.
- 보조 장비나 기계식 리프팅 장치를 사용하여 무거운 제품을 안전하게 들어 올리고 위치를 잡습니다.
- 나사를 단단히 조이되 과도 조이지 마십시오. 과도하게 조이면 제품이 파손되어 유지력이 크게 저하될 수 있습니다.
- 제품을 사용할 때는 움직이는 부분과 멀찍한 거리와 두고 사용하십시오.
- 의도한 대로만 사용합니다. 절대로 제품 위에 서거나 타보거나 올라가지 마십시오.
- 본 제품은 실내 전용 제품입니다.
- 제품의 구조를 재구성하려는 시도는 허용되지 않습니다.
- 본 제품은 삼킬 경우 질식 위험이 있을 작은 부품이 함유될 수 있습니다. 제품이 어린이의 사용을 위한 것이 아니고 어린이가 모든 지침과 정보서를 완전히 이해한 경우를 제외하고, 어린이로 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 제품의 안전성을 정기적(최소 3개월에 한 번)으로 확인합니다.

질문이 있거나 도움이 필요하신 경우 구입처에 문의하여 도움을 받으십시오.


CN (繁) **重要:**
請在安裝前仔細閱讀本手冊至完全理解。任何不遵守本手冊的操作可能會導致嚴重的人身傷害、產品損壞、或造成保修失效。

安全提示與警告:
- 請確保安裝表面足以支撐所安裝的產品和設備。
- 請勿超過所列的最大可承重量。
- 請務必用人員助手或使用機械升降裝置輕鬆工具安全抬起重產品。
- 擰緊螺絲，但鎖勿過度擰緊以免損害產品或降低其所保產品性能。
- 操作時產品應距離移動部件，並與產品這重部件保持適當距離。
- 請勿將此產品用於其他目的，切勿站立、攀掛、攀爬本產品以外的產品或設備。
- 僅限室內使用。
- 請勿擅自修改產品結構。
- 此產品包含有吞嚥時可能引致窒息危險的小部件。請保關於童，除產品本身為其單設計，且其已完全理解本手冊後，勿讓孩子接觸本產品。
- 請定期檢查產品是否安全可用（至少每三個月）。

若您有任何疑問或需要任何幫助，請聯繫當地經銷商。

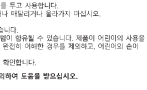

Workstation and Accessories

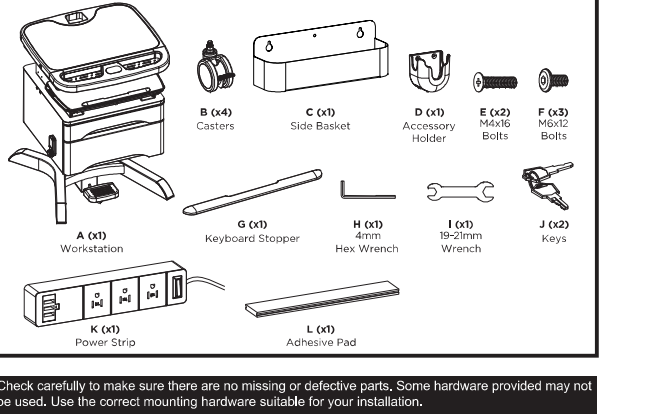


Check carefully to make sure there are no missing or defective parts. Some hardware provided may not be used. Use the correct mounting hardware suitable for your installation.

CHOKING HAZARD. Package includes small parts.
Not for children under 3 years. Adult supervision is required.

Missing Parts? Call us at (855) 925-5668 and we will ship replacement parts free of charge.


DIMENSIONS & WEIGHT CAPACITY

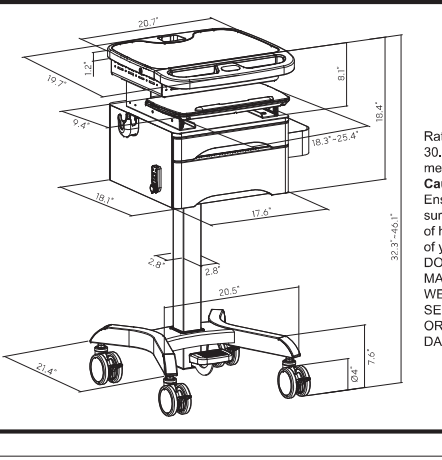


Rated weight capacity is 30.8lbs/14kgs for the medical cart.
Caution:
Ensure all mounting surfaces are capable of holding the weight of your mount.
DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY. SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR!

Step 1
Attach the Casters

• Turn the Workstation (#A) upside down and attach the Casters (#B) using the Wrench (#I).
• Turn the workstation upright and raise the cart by holding each side of the platform then stepping on the foot pedal.
Warning: Do not hand tighten. Securely tighten both nuts on all casters and retighten after any level adjustments are made to the casters.

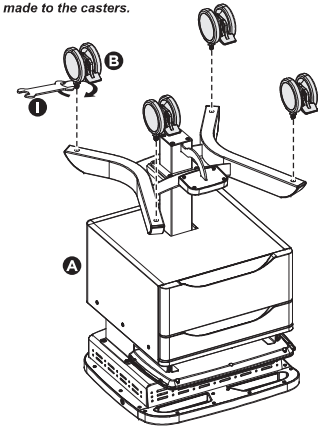


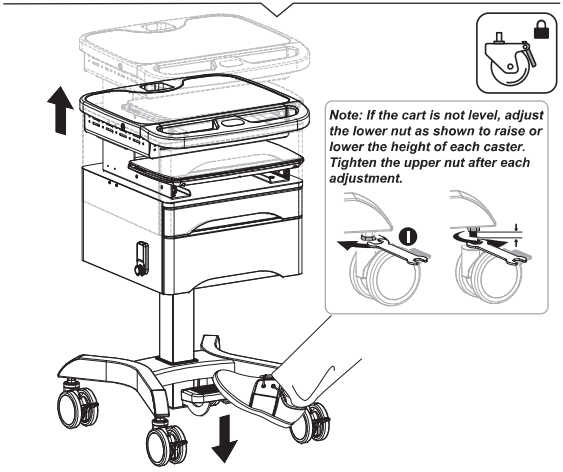

Step 2
Attach the Keyboard Stopper


• Pull the keyboard tray out. Peel the adhesive backing off the Keyboard Stopper (#G) and press it firmly into place on the end of the keyboard tray.



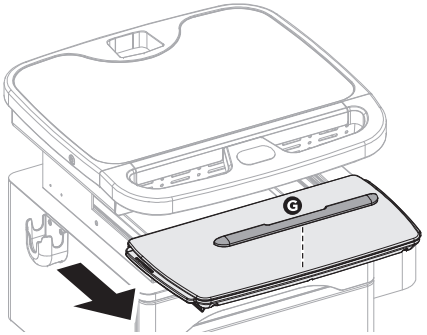

Step 3
Attach the Side Storage


• To the sides of the workstation, attach the Accessory Holder (#D) using the M4x16 Bolts (#E), and the Side Basket (#C) using the M6x12 Bolts (#F).

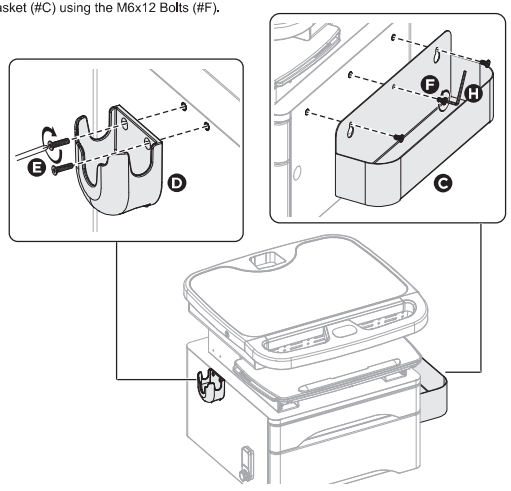

Step 4

Open the Cable Compartment


• Insert the Keys (#J) into the locks on both sides of the workstation and turn them counter-clockwise to unlock. Lift the front of the cover up, then off the workstation to access the cable compartment.
Note: The keys must be inserted into both locks at the same time. The keys will be unable to be removed from the locks while they are in the unlocked position.

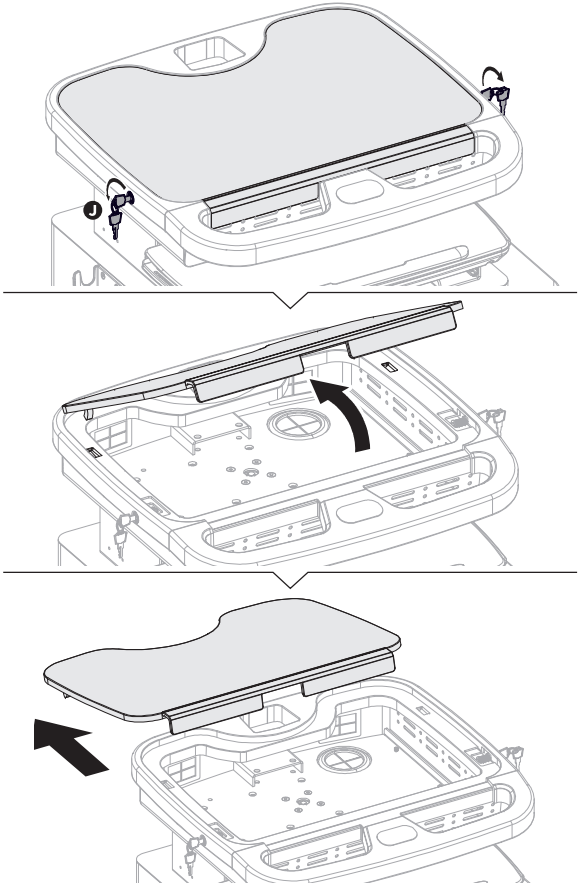

Step 5

Install the Power Strip

• Use the Adhesive Pad (#L) to secure the Power Strip (#K) into place inside the compartment.
• Route the power cable out through the port in the bottom of the compartment.

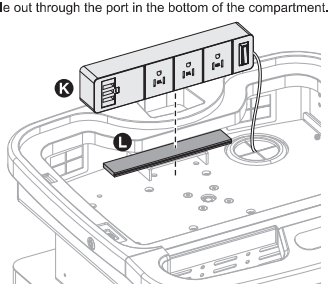




Step 6


Close the Cable Compartment

• Place the cover back onto the top of the cable compartment by first aligning the tabs with the holes near the back of the cover, then lowering it into position.
• Turn the keys clockwise to lock the compartment again.

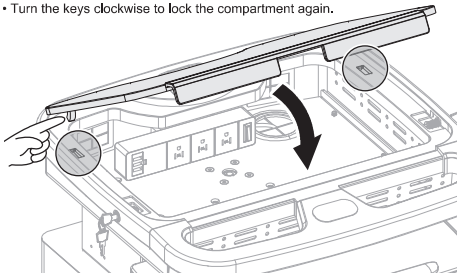




Align with the holes, and then install the desktop panel as shown below.

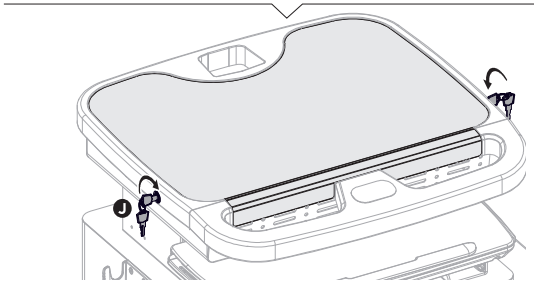


Step 7
Lock Battery

• To replace or install the lock battery, slide the battery compartment out and insert a new CR2032 battery, then reinsert the battery compartment into the lock.

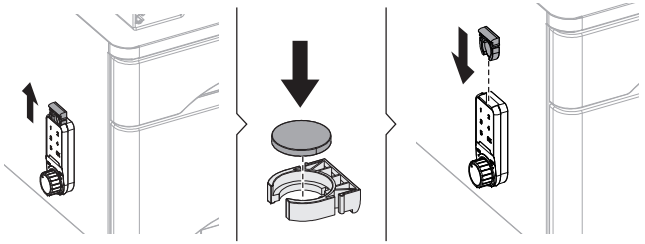


Step 8
Open the Drawer

• Ender the password and press "OK". Turn the knob to the "Open" position, then open the drawer.
• To lock, close the drawer and turn the knob back to the "Lock" position.

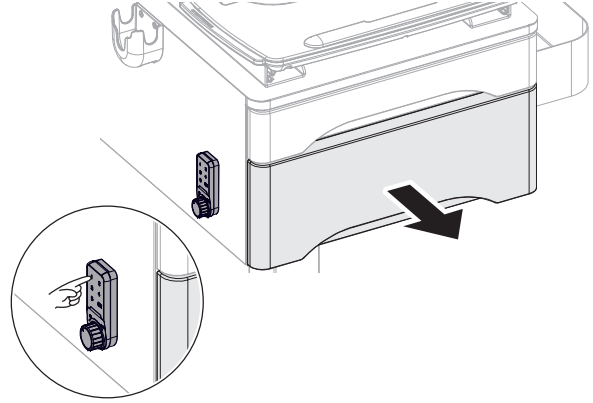


Enter the password and press "OK". Then turn the knob to "Open" to unlock and open the lower drawer.

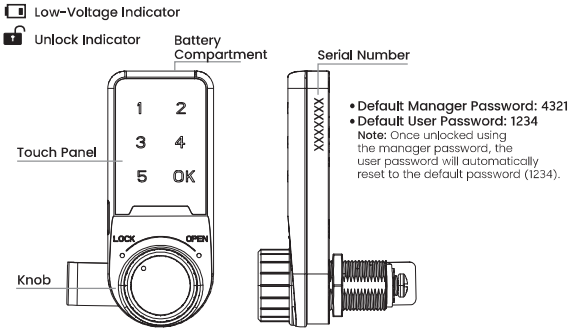

How to Operate


• Unlock

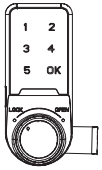

1. Enter the default user password "1234" or the default manager password "4321", then press "OK".
2. The buzzer will emit one long beep, and the green unlock indicator light will turn on.
3. Rotate the knob to the "OPEN" position within 3 seconds.

Note:
If the password is incorrect, the buzzer will beep three times.
If the lock displays the low-voltage indicator , the batteries need replacement.

• Lock

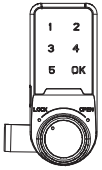

1. Rotate the knob back 90 degrees to the "LOCK" position.

• Settings

1. Change Password
Enter the current password, then press “OK”. The buzzer will emit a long beep, and the unlock indicator will light up. Press and hold “OK” for at least 2 seconds. The indicator light will flash. Enter the new password (4–15 digits), then press “OK”. A long beep confirms the password has been successfully changed.

2. Enable / Disable Public Mode
a) Enter the manager password , then press “OK”. The buzzer will emit a long beep and the unlock indicator light will turn on.
b) Press and hold “OK” for at least 2 seconds until the unlock indicator light flashes.
c) Enter “44”, then press “OK”. A long beep confirms that Public Mode has been enabled.
Enter “43”, then press “OK”. A long beep confirms that Public Mode has been disabled.

3. Set Temporary Password
a) Press “OK”. The unlock indicator light will flash.
b) Enter a temporary password (4–15 digits), then press “OK”. A long beep confirms that the temporary password has been successfully set.
Note: The temporary password can be used only once.

4. Enable / Disable Fake PIN Mode
a) Enter the manager password, then press “OK”. The buzzer will emit a long beep and the unlock indicator light will turn on.
b) Press and hold “OK” for at least 2 seconds until the unlock indicator light flashes.
Then press “OK” again.
c) Enter “42”, then press “OK” to enable Fake PIN mode. A long beep confirms that the mode has been enabled.
Enter “41”, then press “OK” to disable Fake PIN mode. A long beep confirms that the mode has been disabled.

• Features

a) Emergency Decode
If the password is forgotten, contact Mount-It! customer support for instructions to reset the password.
b) Anti-Theft Technology & Fake PIN Function
This lock supports Fake PIN technology. You may enter random digits before or after the correct password to prevent the real password from being observed.Maximum input length: 16 digits.
c) Automatic Alarm Protection
After four consecutive incorrect password attempts, the lock will sound an alarm and remain locked for 60 seconds.
d) Low Battery Warning
When the low-voltage indicator lights up, replace the batteries. The lock cannot operate when the battery level is too low.
e) Powered by CR2032 (3V) batteries. The last saved password will be retained after replacing the batteries.

• Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
When entering the password, the alarm beeps twice and the low-voltage indicator flashes twice.	Low battery	Replace batteries
When entering the password, the alarm sounds and the low-voltage indicator remains on. The lock cannot be opened	Knob not in correct position	Turn knob to correct position
No sound from the touch panel, but the lock can be opened	Buzzer malfunction	Replace buzzer

Accessories & Mounts →		MI-16051	MI-16052*	MI-16053	MI-16054	MI-16055	MI-16005SW	MI-16006	MI-16007	MI-16008
Carts ↓		CPU Holder	Mini CPU Holder	Scanner Holder	Wipes Holder	Printer Holder	Swivel Monitor Mount	Full Motion Monitor Arm	Full Motion Laptop Arm	Tablet Arm
MI-16036	Medhub Mobile Laptop Cart	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
MI-16037	Medhub Mobile Laptop Cart with Drawers	☐	☑	Included	☑	☑	☑	☑	☑	☑
MI-16040	Medhub Motorized Mobile Laptop Cart	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

*Requires MI-16005SW or MI-16006 monitor mount

Visit us at **www.mount-it.com** for product registration and warranty information.

Our US based customer service team is standing by to answer any questions you have about your Mount-It! product.

Available by phone **Monday - Friday from 5:00am to 5:00pm** PST.

Chat live with an agent on our website!



support@mount-it.com



(855) 925-5668



www.mount-it.com